


medi stream®

Zufriedene Patienten mit wenig Aufwand!



medi stream® 3000 – die Wasser-Massage-Liege der
Premiumklasse für medizinisch-therapeutische Anwendungen.

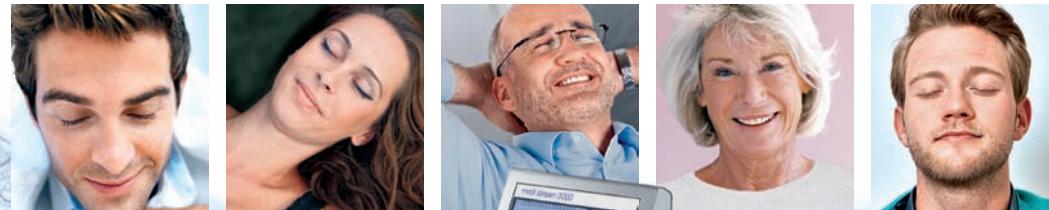

geprüft nach EN 60601-1:2006 (3rd Edition)

medi stream® Wasser-Massage-Liegen mit WOW!-Effekt.

WOW! Die Kraft des Wassers . . .

... für medizinisch-therapeutische Anwendungen.

medi stream® 3000. Die Kraft des Wassers in Bahnen gelenkt.

Jeder kennt die Kraft des Wasserstrahls.
Diese haben wir uns zu Nutze gemacht.

medi stream® 3000 massiert den Patienten,
der auf einer warmen und flexiblen Naturkaut-
schukmatte liegt, mittels Wasserdruckstrahlen.
Diese werden von zwei Düsen erzeugt, die sich
unter der Matte bewegen.

Ähnlich wie bei der klassischen manuellen
Massage können dabei verschiedene
Bewegungsabläufe gewählt werden:
Kreisbewegungen, Ausstrecken, Druck-
punktmassage etc. – und das natürlich
in verschiedenen Druckstärken.



Sie haben es in der Hand.

Natürlich hat eine Wassermassageliege nicht alle Fähigkeiten
eines ausgebildeten Therapeuten. Je nach Indikation kann
medi stream® 3000 manuelle Anwendungen vorbereiten und
sinnvoll unterstützen oder je nach Fall sogar komplett ersetzen.
Das spart Zeit und gibt Ihnen mehr Raum fürs Wesentliche.



Individuelle Massagewendungen lassen sich schnell und
einfach zusammenstellen. Genauso einfach können frische
professionelle Massageprogramme direkt aus einer un-
fassenden Bibliothek aufgerufen werden.

medi stream® 3000 – Ihr Patienten werden sie lieben. Die
wollige Wärme des Wassers und die intensiv massierende
Wasserstrahl lassen verkrampfte Muskeln lockern. Der
Körper entspannt sich, die Seele gleicht mit. Und das
Schönste ist: Das wollig prickelnde Gefühl hält Stundenlang nach.



medi stream® Wasser-Massage-Liegen mit WOW!-Effekt.


WOW! Große Wirkung.



medi stream® 3000. Ganz flexibel:

Ähnlich wie bei der manuellen Massage widmet sich auch **medi stream® 3000** der kompletten Körperrückseite oder massiert ganz gezielt bestimmte Regionen, z. B. nur den Oberkörper oder die Beine. Im Halswirbelbereich wird der Druck automatisch abgesenkt. Mehr zu den vielen Anwendungs- und Einstellmöglichkeiten auf der nächsten Seite.

Die üblicherweise 15- bis 30-minütige Druckstrahl-Massage fördert die Durchblutung, regt den Stoffwechsel an, wirkt vitalisierend und sorgt für eine spürbare Verbesserung des körperlichen, mentalen und seelischen Wohlbefindens. Verspannungen werden gelöst, die Muskulatur wird locker. Für **medi stream® 3000** sind übrigens auch Patienten mit einem Körpergewicht von **200 kg** kein Problem.

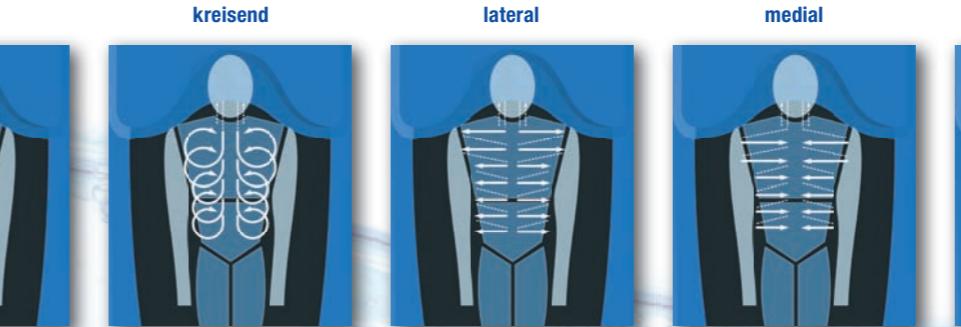

medi stream® 3000. Indikationen:

- Steigerung bzw. Verminderung des Muskeltonus
- Lokale Durchblutungs- und Stoffwechselsteigerung
- Lockern des Unterhautzellgewebes
- Venöse und lymphatische Entstauung
- Reflektorische Linderung von Schmerzzuständen
- Aktivierung bzw. Dämpfung des vegetativen Nervensystems mit günstigen Effekten auf die inneren Organe
- Steigerung der Effizienz anschließender therapeutischer Maßnahmen (Extension, manuelle Therapie, Krankengymnastik etc.)
- Reversible Funktionsstörung der Wirbelsäule
- Subakute Lumbage (weniger akuter Hexenschuss)
- Fibromyalgie
- Psychovegetative Dystonie (Funktionsstörungen an verschiedenen Organen)
- Muskuläre Übermüdung
- HWS- und BWS-Syndrom, Lumbal-Syndrom
- Cervicale Migräne
- Periarthritis humero scapularis mit entsprechenden Muskelverspannungen
- Skoliose, Hohlrundrücken
- Trapezius-Insuffizienz und Verspannungen
- Cervico-brachial Syndrom





medi stream® Wasser-Massage-Liegen mit WOW!-Effekt.

WOW! Wie einfach.

Bedienung per Touch-Screen!

medi stream® 3000 ist dank des **10" Touchscreens mit intuitiver Benutzerführung** ganz bequem zu bedienen:

- Touchscreen drehbar und schwenkbar zum Personal und zum Patienten.
- Einfach zu verstehende Darstellung der Auswahlmöglichkeiten und Operationsbefehle.
- Einfache Programmierung komplexer Behandlungsvarianten bei der individuellen, patientenbezogenen Zusammenstellung von Massagearten und Massagebereichen.
- Die intelligente Software des Touch-Screens ermöglicht eine schnelle Reaktion auf sich ändernde Anforderungen der Betreiber und Nutzer. **medi stream® 3000** ist ein zukunftssicheres Produkt!

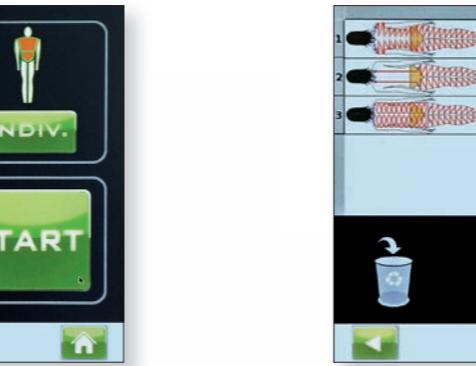
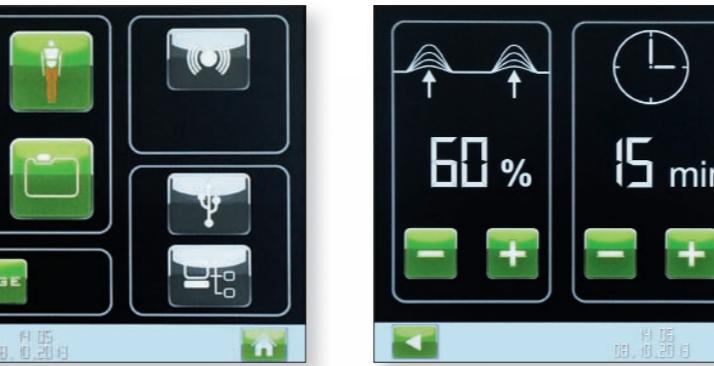


Durch Berühren lassen sich alle **Massagebereiche** auswählen: Ganzkörper, Oberkörper, Unterkörper, Schulter- und Lendenbereich.

Die **Standardmassagen** im ausgewählten Massagebereich wurden speziell von erfahrenen Therapeuten und Sportmedizinern entwickelt.

Druck und Zeit der Standardmassage kann nach Wunsch angepasst werden:

- **Wasserdruck** ändern durch Berühren des + oder - Symbols
- **Massagezeit** (wenn nicht auf der Karte begrenzt) Änderung in 1 Minutenstufen durch Berühren des + oder - Symbols
- Oder weitere **Individualisierung**, genau zugeschnitten auf den Patienten – siehe rechte Seite.

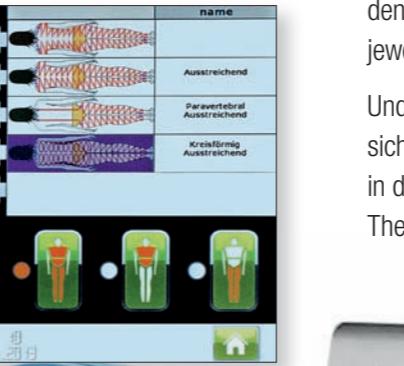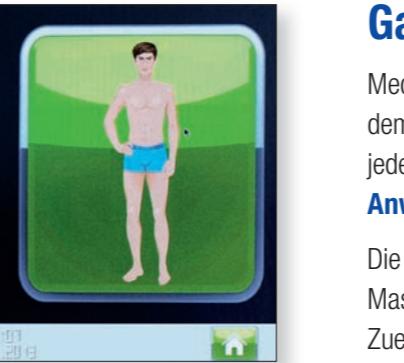

Ganz individuell:

Medizinische Fachkräfte können – in Absprache mit dem Arzt oder Therapeuten – schnell und leicht für jeden einzelnen Patienten **eigene maßgeschneiderte Anwendungen** erstellen.

Die **Individualisierung** und Zusammenstellung der Massage über den Touchscreen bietet viele Möglichkeiten: Zuerst die Auswahl von Geschlecht, Körpergröße und -statur – und schließlich die gewünschte Massageart, den Massagebereich, den Massagedruck und die jeweilige Massagedauer.

Und das Beste ist: Diese individuelle Auswahl lässt sich ganz einfach auf der Patienten-Chipkarte oder in der Bibliothek ablegen und für Folge-Therapien jederzeit wieder abrufen.

Zentimeter-genaue Anpassung an die Anatomie des einzelnen Patienten.

* abhängig von den Raumverhältnissen

medi stream® 3000. Ganz einfach für Sie:

- Wenig Aufwand, das selbst erklärende Bedienoberfläche
- Umfangreiche Bibliothek mit vordefinierten Massage-Programmen
- Normaler Stromanschluss genügt
- Wenig Pflegeaufwand
- **medi stream® 3000** ist semi-mäßig mit einem integrierten Lüftungssystem zur Gitterkühlung ausgestattet. Ein Wasseranschluss ist in der Regel nicht erforderlich*
- Lange Lebensdauer
- Optional PC-Karten-Programmiersoftware
- sehr geräuscharm
- 24 Monate Gewährleistung

medi stream® 3000. Ganz einfach für Ihr Patienten:

- Kein Umziehen nötig: Anwendung in leichter Kleidung
- Kein Nachschwitzen, kein Durstsein
- Positionierhilfe durch Frontgeburg in Kopftell
- Der schwenkbare Touchscreen ermöglicht dem Anwender, ganz komfortabel selbst den Massagedruck zu verändern oder über die Funktion „Sektionsmassage“ die Massagedüsen an beliebigen Stellen verweilen zu lassen.



medi stream® Wasser-Massage-Liegen mit WOW!-Effekt.

WOW! Perfekte Technik.



medi stream®. Das Qualitäts-Versprechen.

Sorgfältiges Handwerk und beste Qualität treffen bei uns auf hohe Innovationskraft. Mit diesem Anspruch arbeiten wir Tag für Tag. Was Sie davon haben? Ein zuverlässiges, hochwertiges Produkt entwickelt auf der Basis langjähriger Erfahrungen, verbunden mit zukunftsorientierter Technik. Von dem einzigartig einfachen Bedienkonzept werden Sie begeistert sein. Und Ihre Anwender auch.

Norbert Menzenbach jr.,
Dipl.-Ing., Inhaber und Geschäftsführer NM Stahlgeräte GmbH



NM Stahlgeräte in Kürscheid

Die Erfahrung von 1967 bis heute hat uns zum Spezialisten für Blechkonstruktionen aller Art gemacht. Innovationen eigener Produkte und Produktlinien sind unsere Stärke. Die mittelständische Größe unseres Unternehmens garantiert unseren Kunden die Flexibilität der Kleinen und die Kompetenz der Großen.



Mensch und Maschine

Moderne Produktionsanlagen sind zur Herstellung bester Produkte unerlässlich. Entscheidend aber sind unsere geschulten und motivierten Mitarbeiter, die in den verschiedenen Bereichen Tag für Tag den Erfolg erarbeiten. Ob als Team in der Organisation oder in der Fertigung.



medi stream® 3000. Die Fakten.

Textil: Länge: 2.465 mm, Breite: 1.255 mm, Höhe: 600 mm, Liegefläche: 1.950 x 760 mm



Design Textil

Acryl: Länge: 2.200 mm, Breite: 1.050 mm, Höhe: 600 mm, Liegefläche: 1.950 x 760 mm



Design Acryl

Beide Modelle Textil/Acryl:

Gewicht: 610 kg (befüllt), Deckenbelastung: 380 kg/m²
Max. zulässige Belastung der Gummimatte: 200 kg
Stromanschluss: 1 x 230 V/50 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 3.680 VA
Absicherung: 1 x 16 A (separater Stromkreis erforderlich)
Schutzklasse: I
Maximale Pumpenförderleistung: 400 l/min
Maximaler Wasserdruk: 6,0 bar
Wasservolumen: 430 l
Wassertemperatur: 20 °C – 40 °C (einstellbar)

Design-Varianten und technische Änderungen vorbehalten.

medi stream® Wasser-Massage-Liegen mit WOW!-Effekt.



WOW! Nach Wunsch.

„Ihre“ medi stream® 3000. So individuell wie Sie es wünschen.

Wählen Sie zwischen unseren beiden Basis-Modellen in solider, anspruchsvoller Verarbeitung. Auf Wunsch und gegen Aufpreis auch ganz individuell in Ihren Farbkombinationen.

Modell Acryl:

- Standard: Acrylscheibe weiß
- Auf Wunsch: individueller Foliendruck für vollflächige farbige Motive und Logos

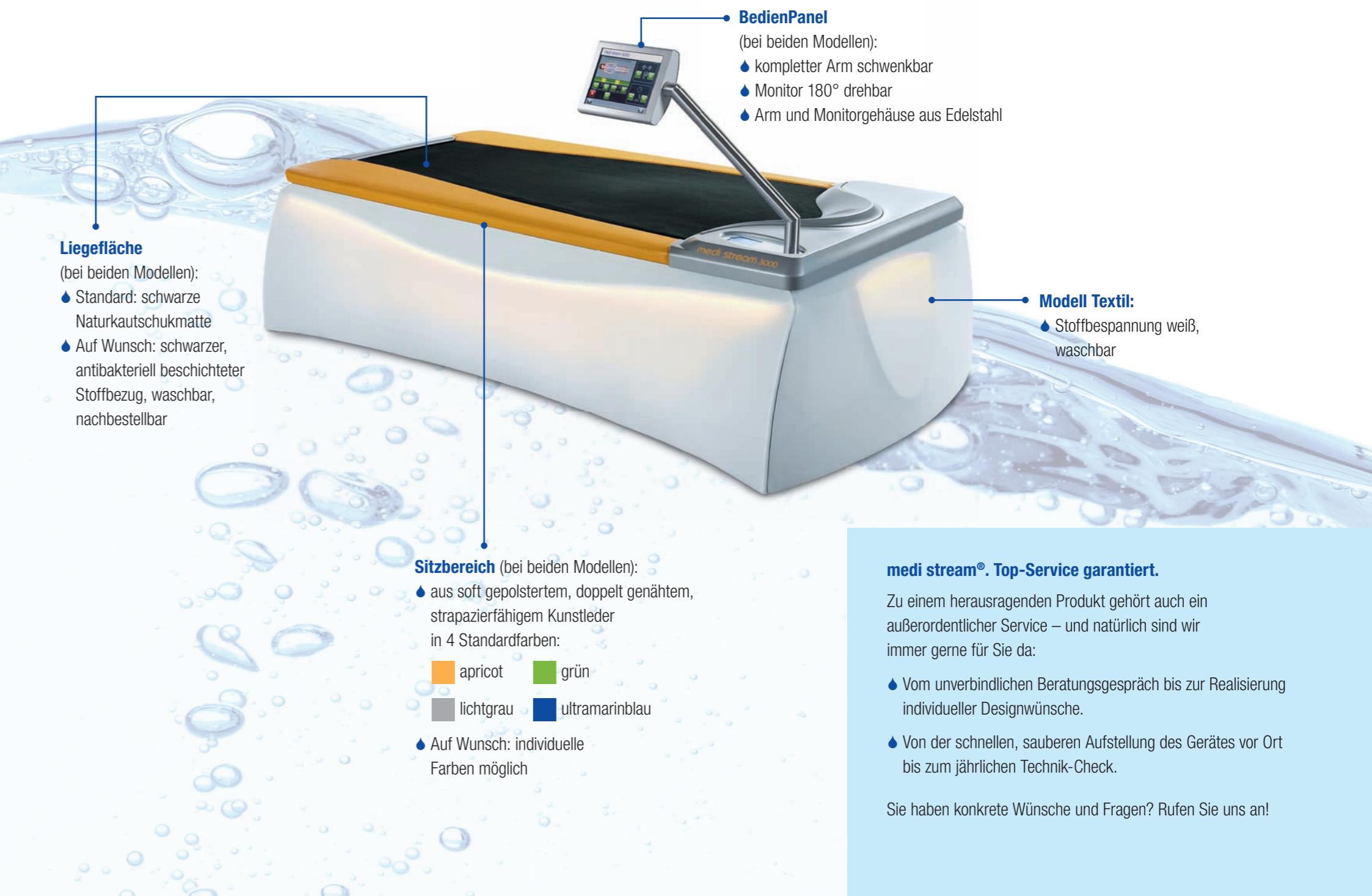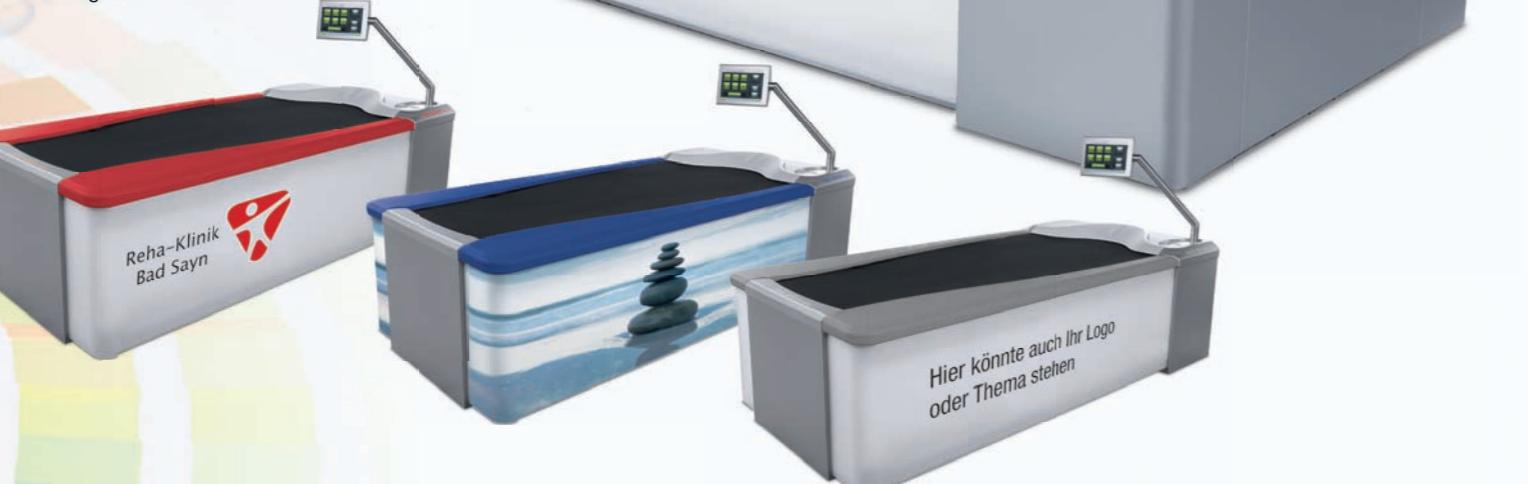

• BedienPanel

(bei beiden Modellen):

- kompletter Arm schwenkbar
- Monitor 180° drehbar
- Arm und Monitorgehäuse aus Edelstahl

Liegefläche

(bei beiden Modellen):

- Standard: schwarze Naturkautschukmatte
- Auf Wunsch: schwarzer, antibakteriell beschichteter Stoffbezug, waschbar, nachbestellbar

Sitzbereich

(bei beiden Modellen):

- aus soft gepolstertem, doppelt genähtem, strapazierfähigem Kunstleder in 4 Standardfarben:

apricot	grün
lichtgrau	ultramarinblau
- Auf Wunsch: individuelle Farben möglich

medi stream® Top-Service garantiert.

Zu einem herausragenden Produkt gehört auch ein außerordentliches Service – und natürlich sind wir immer gerne für Sie da:

- Vom unverbindlichen Beratungsgespräch bis zur Realisierung individueller Designwünsche.
- Von der schnellen, sauberen Aufstellung des Gerätes vor Ort bis zum jährlichen Technik-Check.

Sie haben konkrete Wünsche und Fragen? Rufen Sie uns an!



medi stream®

Für Arztpraxen, Krankenhäuser, Reha-Kliniken,
Physiotherapeuten. Und für Sie!

Vertrieb Österreich:
ad rem team gmbh – therapie4you
Auenbrugger Gasse 2/11
1030 Wien

T. 01 710 3165
vertrieb@ad-rem-team.com
www.therapieshop.at

AUSTRIA SKI TEAM PARTNER FÜR THERAPIE

therapie 4 you
www.ad-rem-team.com

